



Perfect Dent

WISMY



4 YEARS
WARRANTY


Wismy EndoMotor

Wisomy EndoMotor Features



Smart Design

**SLIM
NECK**

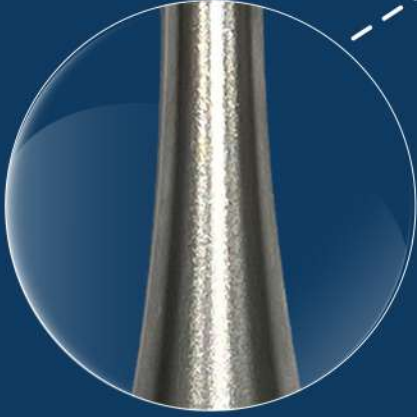

**MINI
HEAD**



1 تصميم ذكي
برأس أصغر و هيكل
أنحف

2 Smart File Remover

Without Hand
Manipulation

زر لإزالة الفاييل تلقائياً
بمجرد الضغط



Speed and Torque

B Stable speed and high torque

سرعة ثابتة وعزم قوي تحت الضغط

STABLE

SPEED
SPEED

UNDER PRESSURE



TORQUE

0.6-6 N.cm

SPEED

150-1200 rpm

Programs and Charging



4

10 Adjustable Programs

10 برامج قابلة للتعديل

(Automatically saved)

6 Plug & Play option

إمكانية استخدام الجهاز أثناء شحنه بـ Power bank دون الحاجة للانتظار وتضييع الوقت



Movements

7 All options that endodontists need in one device

Rotation Modes:

1- Forwards

دوران مستمر مع عقارب الساعة

2- Reverse

دوران مستمر عكس عقارب الساعة

3- Reciprocation mode

Fully adjustable angles

دوران تبادلي، يمكنك تعديل الزوايا


ليناسب جميع أنواع الـ Files



Prevent File Fracture:


الجهاز الوحيد المتميز بوجود الخاصيتين سوياً:

1- Auto-Reverse

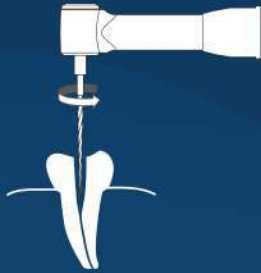

2- OTR (Optimum Torque Revers)

بزوايا قابلة للتعديل

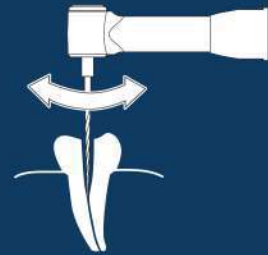


Dual Function Features:

When connected with BOMEDENT APEX LOCATOR




1- Auto start

بدء تلقائي عند لمس القناة

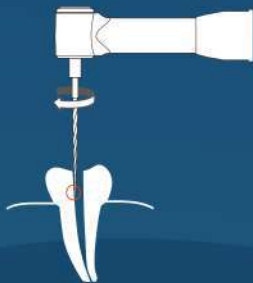


2- Auto stop

توقف تلقائي عند مغادرة القناة

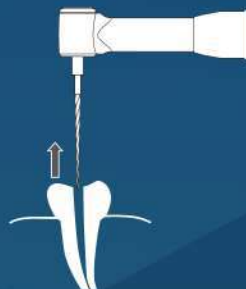

3- Apical reverse

عكس الحركة تلقائي عند الوصول لنهاية القناة

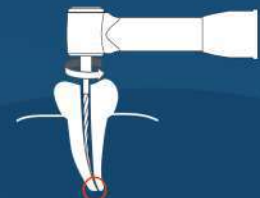

Weight and Sleeves

8 Suitable weight
وزن خفيف ومریح للید

9 3 أغطية سيليكون
قابلة للتعقيم



3 autoclavable
silicone
sleeves



CONTACT US



perfectdenteg.com



[perfectdentco](https://www.facebook.com/perfectdentco)



[perfectdentco](https://www.instagram.com/perfectdentco)



[perfectdentco](https://www.youtube.com/perfectdentco)



[perfectdenteg](https://www.linkedin.com/company/perfectdenteg)



[perfectdenteg](https://twitter.com/perfectdenteg)



info@perfectdenteg.com



+201552974571



+201018436971



74 Ammar ibn Yasser, above Metro Market,
Masr Al Jadidah, Cairo, Egypt